




neodisher® IP Konz



น้ำยาเคลือบและหล่อลื่นเครื่องมือแพทย์ ปลอดภัยจากสารพิษ (Toxicologically certified)

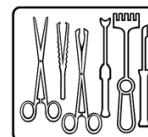

เหมาะสำหรับ:

- ใช้สำหรับเคลือบและหล่อลื่นเครื่องมือแพทย์ในกระบวนการล้างด้วยน้ำสุดท้าย

คุณสมบัติ:

- neodisher® IP Konz เป็นน้ำยาเคลือบและหล่อลื่นที่มีส่วนผสมเป็น paraffin บริสุทธิ์ ผลิตตามมาตรฐานการผลิตยาของประเทศเยอรมนี German pharmacopoeias neodisher® IP Konz ใช้ผสมในการล้างน้ำสุดท้ายในเครื่องล้างอัตโนมัติ หรือสำหรับการล้างด้วยมือโดยไม่ต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง สารตกค้างที่อยู่บนเครื่องมือไม่มีอันตรายและสามารถนำเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำได้ทันที ด้วยส่วนผสมของสาร emulsifier ในน้ำยา ทำให้สามารถใช้ได้กับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ neodisher® IP Konz ไม่เหมาะสำหรับเครื่องมือที่จะไปทำการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง neodisher® IP Konz ปราศจากจุลินทรีย์กลุ่ม Vegetative

การใช้งานและปริมาณการใช้:

- สำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ Washing Disinfection ให้ใช้ความเข้มข้น 1-2 ml/L ในขั้นตอนล้างน้ำสุดท้ายที่อุณหภูมิอย่างน้อย 50°C สำหรับการแช่หล่อลื่นด้วยการจุ่มแช่ในอ่าง ต้องระวังเรื่องของการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งอาจจะใช้สารหล่อลื่นในรูปแบบของสเปรย์แทนคือ neodisher IP Spray

ข้อมูลอ้างอิงผลการทดสอบ:

- ผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐาน EN ISO 10993-1 สารออกฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ของ FDA จดทะเบียนเลขที่ 176210, 177120 และ 172878

ข้อมูลทางเทคนิค:

- Specific gravity (20°C): 0.9 g/ cm³
- Viscosity (concentrate, 20°C): < 50 mPas

ส่วนประกอบ:

ส่วนผสมเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของยุโรป 648/2004

1. 15-30% non-ionic surfactants
2. >30% aliphatic hydrocarbons (Liquid paraffin DAB), also preservatives

เครื่องหมาย:

- neodisher® IP Konz ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนดของยุโรปที่ 93/42/EC Annex I

ข้อมูลในการเก็บรักษา:

- อย่าเก็บในที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ถ้าอยู่ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C จะเปลี่ยนเป็นสีขุ่น อายุการใช้งาน 2 ปี เมื่อเก็บรักษาตามข้อกำหนด

คำเตือนด้านความปลอดภัย:

- สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ให้ดูเอกสาร Safety Data Sheet